


Акции

август –
октябрь 2026

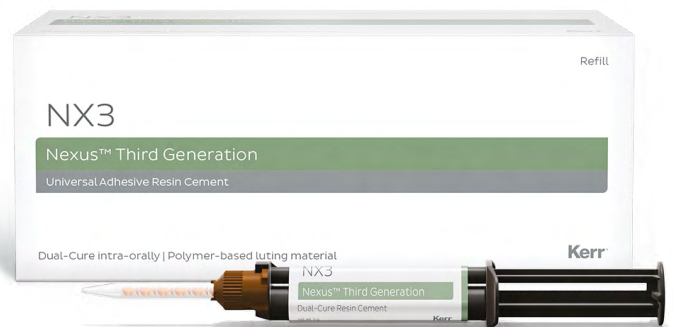

Kerr™

СКИДКА

35%

ЦЕНА СО СКИДКОЙ

4 200 ₽

С 1 АВГУСТА ПО 31 ОКТЯБРЯ 2026



Maxcem Elite™ Universal

Самопротравливающий самоадгезивный
композитный цемент для постоянной фиксации

Максимальная универсальность и гибкость при работе

- Нет необходимости в проведении адгезивного протокола, ручного замешивания и хранения в холодильнике
- Высокая цветовая стабильность
- Хорошая совместимость с ортопедическими конструкциями на основе оксида циркония и керамики на основе дисиликата лития
- Нет необходимости в протравливании корневого канала и нанесении адгезива на штифт при фиксации стекловолоконных штифтов
- Легкое удаление излишков цемента

34057

Цемент Maxcem Elite™ Universal, самоадгезивный; мини-набор (Mini Kit): 1 шприц (5 г) прозрачного оттенка, 4 стандартных смесительных насадок, 4 насадки с широким наконечником, 4 интраоральные насадки

Доктор Владислав Фисенко

Врач стоматолог-ортопед, гнатолог.
Ведущий специалист в клинике
«BELGRAVIA DENTAL STUDIO», г. Москва

Вебинар

Циркониевые реставрации.
Фиксация на Maxcem Elite™ Universal



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr.
ООО «И Эйч Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.


Kerr

РЕСТАВРАЦИЯ

СКИДКА
23%

ЦЕНА СО СКИДКОЙ
11 400 ₽

С 1 АВГУСТА ПО 31 ОКТЯБРЯ 2026

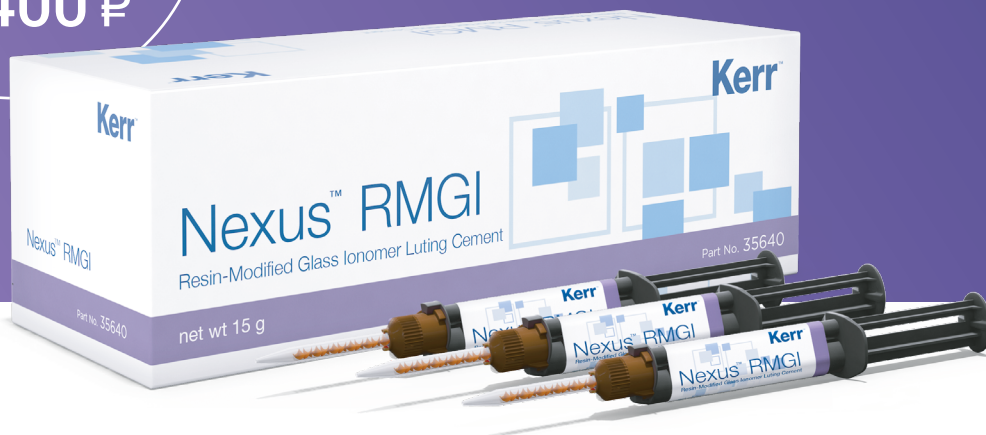

Nexus™ RMGI

Стеклоиономерный цемент, усиленный композитной смолой

Повышенная прочность и выдающаяся эстетика



Высокая сила адгезии

Инновационная технология двойной адгезии обеспечивает высокую прочность адгезии к структурам зуба и часто используемым стоматологическим субстратам, включая керамику на основе оксида циркония



Дополнительная защита от вторичного кариеса

Обеспечивает долгосрочное устойчивое выделение фтора, а также высвобождение ионов кальция и цинка в ответ на кислые условия, подавляя рост кариесогенных бактерий и помогая защитить зубы от вторичного кариеса



Выдающаяся эстетика

Обеспечивает высокую прозрачность и стабильность цвета для получения наиболее эстетически привлекательных результатов



Легкое и быстрое удаление излишков

Усовершенствованная технология придает цементу оптимальное гелеобразное состояние и способность к светоотверждению для более предсказуемого клинического результата

35640

Цемент стоматологический стеклоиономерный Nexus™ RMGI:
3 шприца (5 г) прозрачно-белого оттенка, 24 насадки для смешивания



Доктор Сергей Горев

Врач стоматолог-терапевт-ортопед-хирург,
ассистент кафедры стоматологии ДПО Омского
Государственного Медицинского университета, г. Омск

Вебинар

Цементы для фиксации не прямых реставраций



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr.
ООО «И Эйч Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr™

РЕСТАВРАЦИЯ


С 1 АВГУСТА ПО 31 ОКТЯБРЯ 2026

СКИДКА
15%

ЦЕНА СО СКИДКОЙ
7 600 ₽

СКИДКА
15%

ЦЕНА СО СКИДКОЙ
3 800 ₽

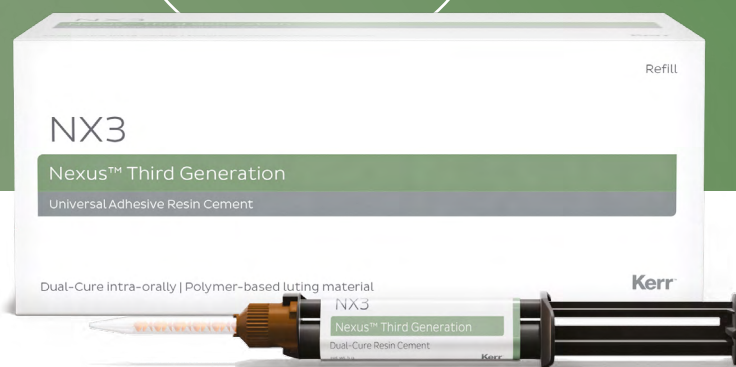

NX3

Композитный цемент для постоянной фиксации

Удобство фиксации – предсказуемый результат



Высокая эстетика
и цветовая
стабильность



Примерочные гели
соответствуют
оттенкам цемента



Удобное удаление
излишков цемента



Универсальность
для всех видов
ортопедических
конструкций



Совместим со всеми
адгезивными
системами



Возможность
использования
для восстановления
культи

33643

Цемент NX3, двойного отверждения
в двойном шприце (5 г), прозрачный, 8 насадок

33648

Цемент NX3, светоотверждаемый,
шприц (1,8 г), прозрачный

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr.
ООО «И Эйч Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr

РЕСТАВРАЦИЯ



OptiBond™ Universal

Универсальный однокомпонентный
светоотверждаемый адгезив


- Универсальность применения: для прямых и не прямых реставраций
- Подходит для любой техники: тотальное, селективное и самопротравливание
- Эффективен при нанесении всего одним слоем
- Гидрофильная технология OptiBond™ гарантирует проникновение в дентинные каналы и защищает от микроподтеканий и постоперационной чувствительности
- Запатентованная формула с мономером GPDM и инновационной трехкомпонентной системой растворителей обеспечивает надежную адгезию к эмали и дентину
- Тонкая адгезивная пленка не завышает ортопедическую конструкцию

Совместное использование OptiBond™ Universal и NX3

OptiBond™ Universal в сочетании с композитным цементом NX3 обеспечивает высокое качество непрямого бондинга к различным стоматологическим материалам без использования праймера для керамики или металла.



Прочность адгезии к различным
стоматологическим материалам

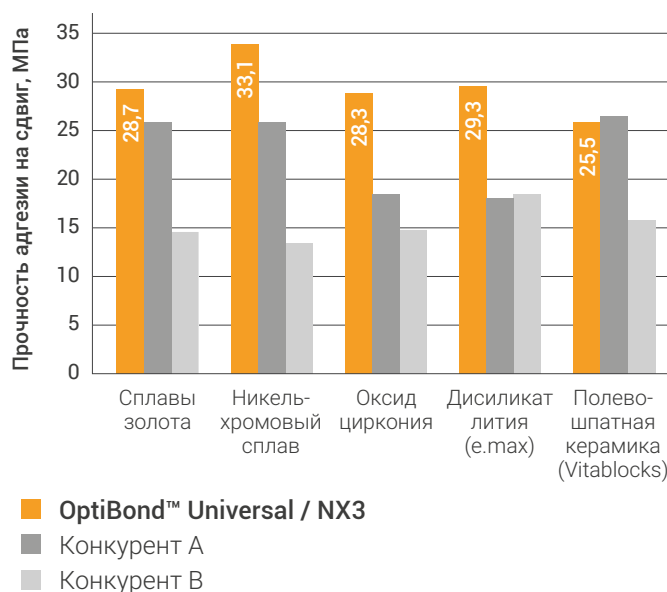

ГИД ПО ВЫБОРУ ЦЕМЕНТА ДЛЯ ФИКСАЦИИ

Виды материалов		Стеклокерамика: • Дисиликат лития • Лейцитная керамика	Полево- шпатная керамика	Композиты	Оксид циркония	Металл, PFM сплавы	Золото
Виды конструкций							
Постоянная фиксация	 Виниры	NX3, Maxcem Elite™ Universal	NX3, Maxcem Elite™ Universal	NX3, Maxcem Elite™ Universal			
	 Коронки	Maxcem Elite™ Universal, NX3	Maxcem Elite™ Universal, NX3	Nexus™ RMGI, Maxcem Elite™ Universal, NX3	Maxcem Elite™ Universal, Nexus™ RMGI, NX3	Nexus™ RMGI, Maxcem Elite™ Universal, NX3	NX3
	 Вкладки/ накладки	NX3	NX3	NX3, Nexus™ RMGI		NX3, Nexus™ RMGI, Maxcem Elite™ Universal	NX3
	 Мостовидные конструкции	Maxcem Elite™ Universal, NX3	Maxcem Elite™ Universal, NX3		Maxcem Elite™ Universal, Nexus™ RMGI	Nexus™ RMGI, Maxcem Elite™ Universal, NX3	
	 Мост Мерилэнд	NX3	NX3	NX3		NX3	
	 Абатмент на имплантаты				Maxcem Elite™ Universal, NX3	Maxcem Elite™ Universal, NX3	
	 Эндодонтический штифт (анкерный, стекловолоконный)					Maxcem Elite™ Universal, Nexus™ RMGI, NX3	
Временная фиксация	 Временные реставрации	Temp-Bond Clear™, Temp-Bond NE™					
	 Постоянные реставрации	Temp-Bond Clear™, Temp-Bond NE™					

 Наиболее рекомендованный цемент для использования

 Рекомендованный цемент для использования

СКИДКА
25%

ЦЕНА СО СКИДКОЙ
1 850 Р

С 1 АВГУСТА ПО 31 ОКТЯБРЯ 2026



Cleanic™

Паста для профессиональной чистки и полировки зубов

Одна паста для качественной гигиенической чистки и полировки зубов

- Одна паста для чистки и полировки благодаря изменяемой абразивности
- Высокая чистящая и полирующая способность – снижение скорости появления нового налета
- Успешное применение после процедуры чистки пескоструйным аппаратом (PROPHYflex или AirFlow)
- Бережное отношение к эмали благодаря низкой абразивности
- Экономичность использования благодаря упаковке в виде тубы (100 г)
- Укрепление эмали и защита от кариеса благодаря содержанию фторида натрия

3382

Паста Cleanic™ вкус зелёного яблока, с фтором, туба (100 г)

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr. ООО «И Эйч Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr™

РЕСТАВРАЦИЯ

СКИДКА
31%

ЦЕНА СО СКИДКОЙ
5 500 Р

С 1 АВГУСТА ПО 31 ОКТЯБРЯ 2026



OptiDisc™ General Assorted Kit

Полировочные диски

Одна система для финишной обработки всех видов реставраций

- Оптимальная гибкость и наличие укороченного дискодержателя – решение для дистальной группы зубов и труднодоступных областей
- Отсутствие выступающего держателя – точная обработка без царапин на поверхности зубов и реставраций без повреждения мягких тканей
- Прозрачность диска – хороший обзор рабочего поля
- Понятная цветовая кодировка: 4 цвета – 4 степени абразивности

Понятная цветовая кодировка

4 цвета – 4 степени абразивности



4200

OptiDisc™ набор General Assorted Kit, 240 дисков:

Ø 9,6 мм – по 30 шт. очень грубых, средних, тонких, ультратонких дисков;
Ø 12,6 мм – по 30 шт. очень грубых, средних, тонких, ультратонких дисков;
5 дискодержателей (3 стандартных, 2 коротких); 1 OptiShine™

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr.
ООО «И Эйч Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr

РЕСТАВРАЦИЯ

СКИДКА

20%

ЦЕНА СО СКИДКОЙ

4 000 ₽

С 1 АВГУСТА ПО 31 ОКТЯБРЯ 2026



Opti1Step™

Одноэтапная полировочная система для финишной обработки композитов

Одношаговая полировка композитных реставраций:
от удаления микроцарапин до придания сухого зеркального блеска



Возможность многократного использования благодаря автоклавированию



Длительное сохранение рабочих свойств благодаря прочному позолоченному дискодержателю и уникальной абразивной матрице



Контроль абразивности и возможность ее изменения в зависимости от нажатия на инструмент

8000

Полиры Opti1Step™, набор Assortment Kit:

12 полиров для композитов (пламя – 4 шт, чашечка – 4 шт, диск – 4 шт)

Доктор Гюнель Джафарова

Врач стоматолог-терапевт.
Клиника «Мастерская улыбок»,
г. Москва



**Протокол полировки
Kerr™**

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr.
ООО «И Эйч Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr™

РЕСТАВРАЦИЯ

Harmonize™





OptiShade™



Долговечные реставрации, которые сияют

В материалах Harmonize™ и OptiShade™ используется технология адаптивного реагирования ART. Наночастицы кремния и циркония соединяются, а затем спекаются в единую, упрочненную сеть. Кроме того, наполнитель и органическая матрица имеют между собой дополнительные связи. Такая структура обеспечивает высокую прочность и продолжительную устойчивость реставрации к трещинам и сколам благодаря высокому содержанию наполнителя (81%).

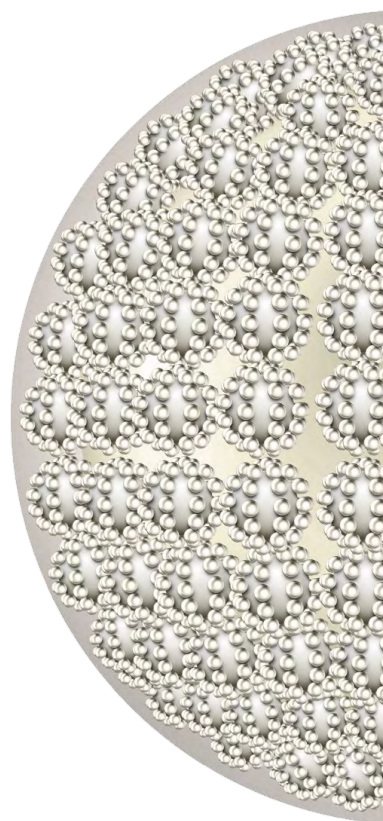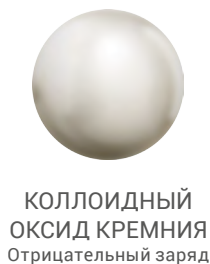

Harmonize™ и Herculite™ XRV Ultra Flow: идеальная пара

Размер основных частиц наполнителя композитов Herculite™ XRV Ultra Flow и Harmonize™ меньше длины волны голубого света. Наличие в составе схожего метилметакрилата обеспечивает совместимость Herculite™ XRV Ultra Flow и Harmonize™ при полимеризации.



КЛИНИЧЕСКИЙ КЕЙС



Доктор Мария Логвиненко

Врач стоматолог-терапевт,
клиника BELGRAVIA DENTAL STUDIO,
г. Москва

Фрагментарная реставрация фронтальных зубов. Harmonize™

1



Исходная ситуация.
Пациент 10 лет. Травма зубов 1.1 и 2.1 вследствие удара.
Зуб витальный.
Зуб 2.1 зафиксирован фрагмент (осколок) зуба на текущий композит Premise™ Flowable с предварительной адгезивной подготовкой OptiBond™ FL зуба и фрагмента.
Зуб 1.1 установлена временная пломба для перекрытия дентинных тканей. Осколок зуба был утерян

2



Изоляция рабочего поля.
На зубе 1.1 проведена адгезивная подготовка OptiBond™ FL. Адаптивный слой Premise™ Flowable.
Небная стенка Harmonize™ TSC, далее оттенок A3D.
Перекрытие скоса препарирования OptiShade™ Medium

3



Финальный вид реставрации сразу после снятия изоляции.
Дополнительно использовались композитные оттенки Harmonize™ XL2D, A2E, A3E с применением смолы Modeling Resin и красителей теплых и холодных оттенков

4



Вид реставрации через неделю.
При полировке использовались полировочные системы OptiDisc™ и Opti1Step™

КЛИНИЧЕСКИЙ КЕЙС

Боковая группа. OptiShade™



Доктор Айя Мамашева

Врач стоматолог-терапевт,
микроскопист.
Клиника «New Iceberg», г. Москва

①



Исходная ситуация. Старый пломбировочный материал на зубе 1.5

②



Черновое препарирование, раскрытие дефекта по II классу

③



Финальное препарирование.
Далее адгезивная подготовка с применением OptiBond™ FL

④



Реставрация композитным материалом OptiShade™ Medium

⑤



Финальный вид реставрации после полировки системами OptiDisc™, Identoflex™ Composite – Yellow, Opti1Step™, Identoflex™ Composite – White.



Kerr™
РЕСТАВРАЦИЯ

КЛИНИЧЕСКИЙ КЕЙС




Доктор Роман Карпенко

Врач стоматолог-терапевт.
Частная практика,
г. Ставрополь

Боковая группа. Harmonize™

1

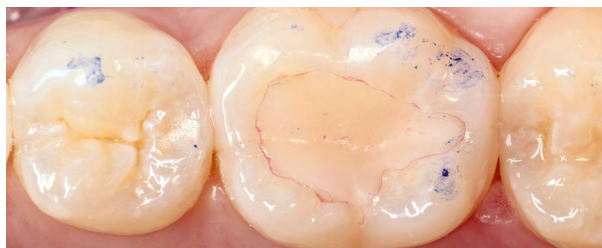

Исходная ситуация.

На зубах 4.6, 4.5 несостоятельные композитные реставрации с разгерметизацией и окрашиванием по границе пломба-зуб. Кариозный процесс эмали и дентина. Проверка окклюзионных контактов артикуляционной фольгой 8 микрон с последующим окрашиванием зубов индикатором налета для качественного очищения рабочего поля

2



Итоговое препарирование

3



Фото в боковой проекции

4



Адаптация матричной системы для восстановления дистальной стенки 4.5. Далее адгезивная подготовка с применением OptiBond™ FL

5



Итоговый вид реставрации, выполненной с помощью композитного материала Harmonize™ АЗЕ и применением темно-коричневого красителя в фиссурах. При моделировке использовалась смола Modeling Resin

6



Фото в боковой проекции

7



Вид после полировки.
В работе использовалась полировочная система Opti1Step™

8



Итоговый вид реставрации после полировки и проверки окклюзии



Доктор Руслан Беретарь

Врач стоматолог-терапевт, ортопед.

Автор методических пособий и курсов по прямой реставрации.

Учредитель и главный врач клиники «RBCLINIC», г. Майкоп

Адгезивный протокол OptiBond™ FL

Я использую OptiBond™ FL уже более 12 лет на терапевтическом и ортопедическом приеме.

Адгезив высоко наполнен — поэтому он обеспечивает выживание шва реставрации в долгосрочной перспективе. Кроме того, при соблюдении протокола вы не столкнетесь с проблемой «белой линии» и постпломбировочной чувствительности. Любите своих пациентов: не пересушивайте дентин перед нанесением праймера и работайте строго по инструкции.

Данный отзыв представляет мнение доктора Беретаря. Производитель стоматологической продукции Kerr не дает медицинских консультаций, каждый врач должен руководствоваться собственным профессиональным мнением при лечении пациентов.


Этап 1. Gel Etchant

1



Динамическое протравливание эмали в течение 15 сек.

2

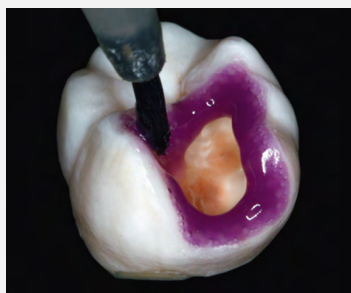

Протравливание дентина в течение 5 сек.

3



Тщательное промывание полости в течение 15–20 сек. до полного удаления геля. Удаление из полости излишков влаги. НЕ ПЕРЕСУШИВАТЬ!

ВАЖНО! Густая консистенция Gel Etchant позволяет контролируемо протравливать эмаль и дентин отдельно друг от друга, что является критичным, учитывая разную степень минерализации и, следовательно, РАЗНОЕ ВРЕМЯ ПРОТРАВЛИВАНИЯ.

OptiBond™ FL

- Сила адгезии, подтвержденная более чем 30-летним опытом применения. «Золотой стандарт» по мнению ведущих университетов мира
- Высокая наполненность (48 %) позволяет надежно запечатать дентин и обеспечить высокий уровень защиты от микроподтеканий
- Простой протокол: один слой праймера, один слой адгезива, одно засвечивание

26684 E

OptiBond™ FL, набор: 1 флакон праймера (8 мл), 1 флакон адгезива (8 мл), 1 шприц протравливающего геля Gel Etchant (3 г) с 10 насадками, 25 емкостей для смешивания, 50 аппликаторов

25882 E

Адгезив, флакон (8 мл)




Kerr

РЕСТАВРАЦИЯ


Этап 2. Праймер OptiBond™ FL

1

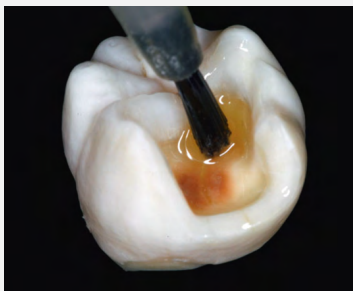


Внесение праймера на поверхность дентина легкими втирающими движениями в течение 15 сек.

2

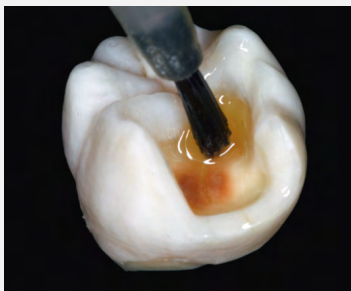

Повторное внесение праймера для гибридации всего объема деминерализованного дентина.


3

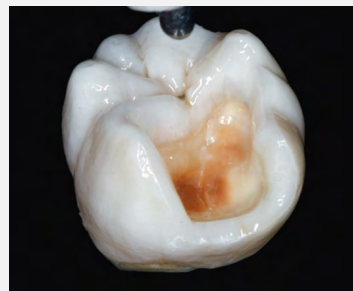

Просушивание поверхности струей воздуха для более равномерного распределения праймера и испарения растворителя.


Этап 3. Адгезив OptiBond™ FL

1

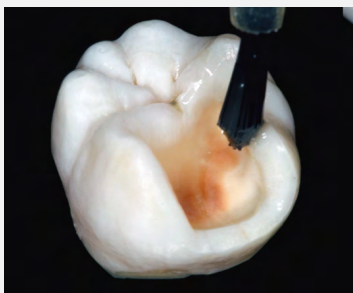

Внесение адгезива на поверхность эмали и дентина. Деликатно раздуйте его струей воздуха до тонкого равномерного слоя.

3

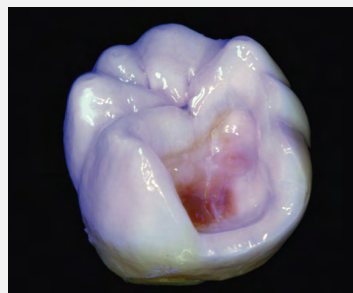

Полимеризация в течение 20 сек.

ВАЖНО! Высокая наполненность адгезива (48 %) гарантирует формирование прочного адгезивного слоя, также выполняющего функцию суперадаптивного слоя.




Доктор Ильяс Османов

Врач стоматолог-терапевт, ортопед.

Кандидат медицинских наук.

Основатель «Центра современной стоматологии "IL'FA", г. Москва

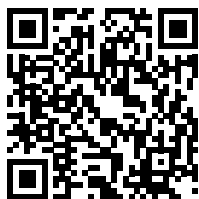

Видеоинструкция

Я использую OptiBond™ FL, так как он является самым наполненным адгезивом из всех, что представлены на рынке, а наполненность — значит прочность! OptiBond™ FL прост в использовании и не даром является золотым стандартом среди всех адгезивов такое долгое время.

Данный отзыв представляет мнение доктора Османова. Производитель стоматологической продукции Kerr не дает медицинских консультаций, каждый врач должен руководствоваться собственным профессиональным мнением при лечении пациентов.

Kerr™ | Telegram-бот



Каталог продукции

быстрый и удобный поиск информации о продуктах (документация, артикулы для заказа)



Протоколы применения

Пошаговые протоколы в формате фото и видео, клинические кейсы от ведущих стоматологов, рекомендации от производителя



Где купить

Контакты официальных дилеров и представителей **Kerr**



Задать вопрос

Консультация с представителем **Kerr** в режиме онлайн или по электронной почте




События

Календарь мероприятий и регистрация на бесплатные вебинары



Новостная рассылка

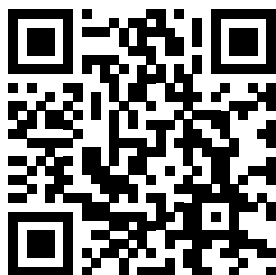

Присоединитесь к Telegram-боту Kerr™
и получите сборник с записями вебинаров