

АКЦИИ май – июль 2026



KerrTM

СКИДКА

35%

ЦЕНА СО СКИДКОЙ

4 200 ₽

С 4 МАЯ ПО 31 ИЮЛЯ 2026



Maxcem Elite™ Universal

Самопротравливающий самоадгезивный
композитный цемент для постоянной фиксации

Максимальная универсальность и гибкость при работе

- Нет необходимости в проведении адгезивного протокола, ручного замешивания и хранения в холодильнике
- Высокая цветовая стабильность
- Хорошая совместимость с ортопедическими конструкциями на основе оксида циркония и керамики на основе дисиликата лития
- Нет необходимости в протравливании корневого канала и нанесении адгезива на штифт при фиксации стекловолоконных штифтов
- Легкое удаление излишков цемента

34057

Цемент Maxcem Elite™ Universal, самоадгезивный; мини-набор (Mini Kit): 1 шприц (5 г) прозрачного оттенка, 4 стандартных смесительных насадок, 4 насадки с широким наконечником, 4 интраоральные насадки



Доктор Владислав Фисенко

Врач стоматолог-ортопед, гнатолог.
Ведущий специалист в клинике
«BELGRAVIA DENTAL STUDIO», г. Москва

Вебинар

Циркониевые реставрации.
Фиксация на Maxcem Elite™ Universal



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr. ООО «И Эйч Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr

РЕСТАВРАЦИЯ

С 4 МАЯ ПО 31 ИЮЛЯ 2026



OptiBond™ Universal

Универсальный однокомпонентный
светоотверждаемый адгезив


- Универсальность применения: для прямых и не прямых реставраций
- Подходит для любой техники: тотальное, селективное и самопротравливание
- Эффективен при нанесении всего одним слоем
- Гидрофильная технология OptiBond™ гарантирует проникновение в дентинные каналцы и защищает от микроподтеканий и постоперационной чувствительности
- Запатентованная формула с мономером GPDM и инновационной трехкомпонентной системой растворителей обеспечивает надежную адгезию к эмали и дентину
- Тонкая адгезивная пленка не завышает ортопедическую конструкцию

Совместное использование OptiBond™ Universal и NX3

OptiBond™ Universal в сочетании с композитным цементом NX3 обеспечивает высокое качество непрямого бондинга к различным стоматологическим материалам без использования праймера для керамики или металла.



Прочность адгезии к различным
стоматологическим материалам

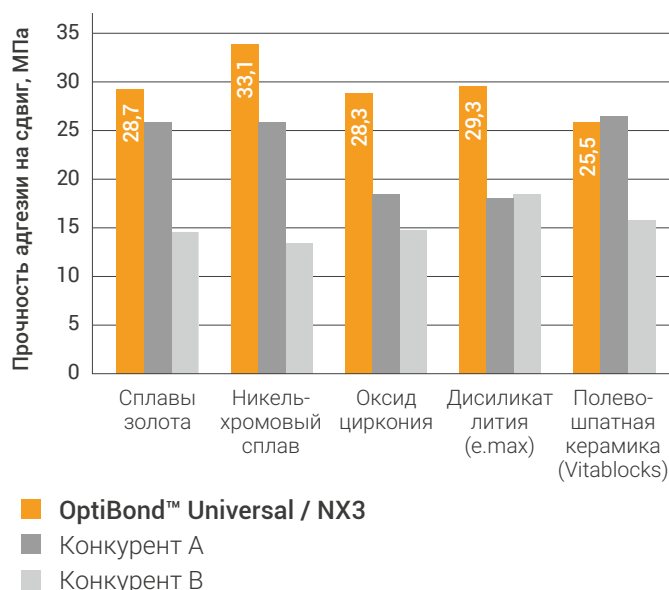

СКИДКА
23%

ЦЕНА СО СКИДКОЙ
11 400 Р

С 4 МАЯ ПО 31 ИЮЛЯ 2026



Nexus™ RMGI

Стеклоиономерный цемент, усиленный композитной смолой

Повышенная прочность и выдающаяся эстетика



Высокая сила адгезии

Инновационная технология двойной адгезии обеспечивает высокую прочность адгезии к структурам зуба и часто используемым стоматологическим субстратам, включая керамику на основе оксида циркония



Дополнительная защита от вторичного кариеса

Обеспечивает долгосрочное устойчивое выделение фтора, а также высвобождение ионов кальция и цинка в ответ на кислые условия, подавляя рост кариесогенных бактерий и помогая защитить зубы от вторичного кариеса



Выдающаяся эстетика

Обеспечивает высокую прозрачность и стабильность цвета для получения наиболее эстетически привлекательных результатов



Легкое и быстрое удаление излишков

Усовершенствованная технология придает цементу оптимальное гелеобразное состояние и способность к светоотверждению для более предсказуемого клинического результата

35640

Цемент стоматологический стеклоиономерный Nexus™ RMGI:
3 шприца (5 г) прозрачно-белого оттенка, 24 насадки для смешивания



Доктор Сергей Горев

Врач-стоматолог-терапевт-ортопед-хирург, ассистент кафедры стоматологии ДПО Омского Государственного Медицинского университета, г. Омск

Вебинар

Цементы для фиксации не прямых реставраций



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr. ООО «И Эйч Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr
РЕСТАВРАЦИЯ

КЛИНИЧЕСКИЙ КЕЙС



Доктор Владислав Фисенко
Врач стоматолог-ортопед, гнатолог.
Ведущий специалист в клиниках
«BELGRAVIA DENTAL STUDIO», г. Москва

Фронтальная группа. Nexus™ RMGI

1



Исходная ситуация
Пациентка 45 лет. На зубах 1.3, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 несостоятельные реставрации. Зуб 1.2 отсутствует, установлен имплантат.
Фото до лечения в улыбке

2



Фото до протезирования зубов 1.3, 1.2, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3

3



Финальное препарирование 1.3, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, в области 1.2 абатмент

4



Зафиксированы временные коронки с помощью цемента Temp-Bond NE™. На последующем приеме цемент был удален с применением OptiClean™

5



Подготовка к снятию слепков

6



Фото после фиксации циркониевых коронок на Nexus™ RMGI через 1 месяц

7



Фото после фиксации в улыбке



СКИДКА

20%

ЦЕНА СО СКИДКОЙ

12 600 ₽

С 4 МАЯ ПО 31 ИЮЛЯ 2026



Harmonize™ Intro Kit

Наногибридный универсальный композит

Выгодный набор с самыми популярными оттенками

Несравненная эстетика

- Усиленный эффект хамелеона
- Выраженный и стабильный блеск

Исключительная прочность

- Высокая прочность и износостойкость
- Особая структура наполнителя обеспечивает высокую наполненность, лучшую интеграцию со смолой и качественную полимеризацию для создания долговечных реставраций

Легкое моделирование

- Динамическая вязкость
- Не прилипает к инструментам

36633

Композит Harmonize™, универсальный, наногибридный; набор Intro Kit:
4 шприца (по 4 г): эмаль A2, A3; дентин A3, A3,5

Harmonize™ и Herculite™ XRV Ultra Flow: идеальная пара

Размер основных частиц наполнителя композитов Herculite™ XRV Ultra Flow и Harmonize™ меньше длины волны голубого света. Наличие в составе схожего метилметакрилата обеспечивает совместимость Herculite™ XRV Ultra Flow и Harmonize™ при полимеризации.



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr. ООО «И Эйч Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr™

РЕСТАВРАЦИЯ

КЛИНИЧЕСКИЙ КЕЙС



Доктор Альфия Араптанова

Стоматолог-терапевт,
г. Уфа

Жевательная группа. Harmonize™

1



Исходная ситуация
Кариозный процесс на зубе 3.5, старый пломбировочный материал и кариозный процесс на зубе 3.6

2



Изоляция рабочего поля с использованием системы OptiDam™. Чистовое препарирование. Вид язычно

3



Чистовое препарирование. Вид окклюзионно

4



Адаптация матричной системы с использованием деревянного оранжевого клина Hawe Sycamore Interdental

5



Фото финальной реставрации – выполнена адгезивная подготовка OptiBond™ FL и восстановление композитным материалом Harmonize™ A3E, A3D. Вид окклюзионно

6



Фото финальной реставрации. Вид язычно

7



Итоговый вид реставрации после полировки с помощью OptiDisc™, Identoflex™ Composite – Yellow, Opti1Step™, Identoflex™ Composite – White

8



Вид реставрации через 1,5 года после лечения

СКИДКА

31%

ЦЕНА СО СКИДКОЙ

5 500 ₽

С 4 МАЯ ПО 31 ИЮЛЯ 2026



OptiDisc™ General Assorted Kit

Полировочные диски

Одна система для финишной обработки всех видов реставраций

- Оптимальная гибкость и наличие укороченного дискодержателя – решение для дистальной группы зубов и труднодоступных областей
- Отсутствие выступающего держателя – точная обработка без царапин на поверхности зубов и реставраций без повреждения мягких тканей
- Прозрачность диска – хороший обзор рабочего поля
- Понятная цветовая кодировка: 4 цвета – 4 степени абразивности

Понятная цветовая кодировка

4 цвета – 4 степени абразивности



4200

OptiDisc™ набор General Assorted Kit, 240 дисков:

Ø 9,6 мм – по 30 шт. очень грубых, средних, тонких, ультратонких дисков;
Ø 12,6 мм – по 30 шт. очень грубых, средних, тонких, ультратонких дисков;
5 дискодержателей (3 стандартных, 2 коротких); 1 OptiShine™

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr. ООО «И Эйч Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr™

РЕСТАВРАЦИЯ

СКИДКА

20%

ЦЕНА СО СКИДКОЙ

4 000 ₽

С 4 МАЯ ПО 31 ИЮЛЯ 2026



Opti1Step™

Одноэтапная полировочная система для финишной обработки композитов

Одношаговая полировка композитных реставраций:
от удаления микроцарапин до придания сухого зеркального блеска



Возможность многократного использования благодаря автоклавированию



Длительное сохранение рабочих свойств благодаря прочному позолоченному дискодержателю и уникальной абразивной матрице



Контроль абразивности и возможность ее изменения в зависимости от нажатия на инструмент

8000

Полиры Opti1Step™, набор Assortment Kit:

12 полиров для композитов (пламя – 4 шт, чашечка – 4 шт, диск – 4 шт)

Доктор Гюнель Джафарова

Врач стоматолог-терапевт.
Клиника «Мастерская улыбок»,
г. Москва



Протокол полировки
Kerr™

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr.
ООО «И Эйч Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr™

РЕСТАВРАЦИЯ


СКИДКА

20%

ЦЕНА СО СКИДКОЙ

2 590 Р


С 4 МАЯ ПО 31 ИЮЛЯ 2026

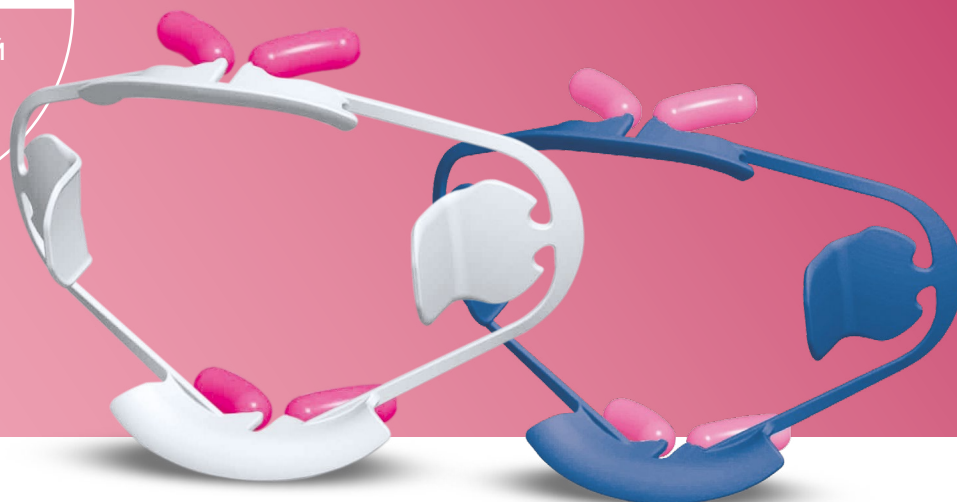

OptiView™

Ретрактор для губ и щек

- Хорошая ретракция губ и щек и улучшенный доступ к операционному полю
- Широкий спектр применения: при фронтальных реставрациях, отбеливании, ортодонтическом, хирургическом и ортопедическом лечении
- Многоразовое использование благодаря возможности автоклавирования
- Комфорт для пациента, как за счет прорезей для уздечек верхней и нижней губ, так и за счет мягких подушечек, которые не давят на переходную складку

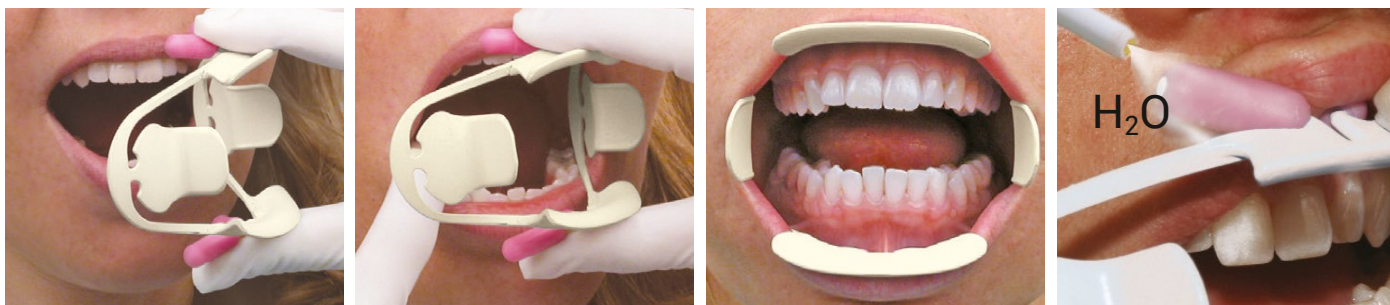

OptiView™ обеспечивает ретракцию губ и щек для улучшенного доступа к рабочему полю. Благодаря анатомической форме и наличию прорези для уздечек минимизирует напряжение, обеспечивая комфорт пациента даже при длительном лечении.

5500

Ретракторы OptiView™, стандартный размер, 2 шт

5502

Ретракторы OptiView™, малый размер, 2 шт

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr. ООО «И Эйч Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr

РЕСТАВРАЦИЯ

СКИДКА

10%

ЦЕНА СО СКИДКОЙ
2 100 ₽



С 4 МАЯ ПО 31 ИЮЛЯ 2026

СКИДКА

25%

ЦЕНА СО СКИДКОЙ
1 850 ₽



Cleanic™

Паста для профессиональной чистки и полировки зубов

Одна паста для качественной гигиенической чистки и полировки зубов

- Одна паста для чистки и полировки благодаря изменяемой абразивности
- Высокая чистящая и полирующая способность – снижение скорости появления нового налета
- Успешное применение после процедуры чистки пескоструйным аппаратом (PROPHYflex или AirFlow)
- Бережное отношение к эмали благодаря низкой абразивности
- Экономичность использования благодаря упаковке в виде тубы (100 г)
- Укрепление эмали и защита от кариеса благодаря содержанию фторида натрия

3183

Паста Cleanic™ Mint Fluoride-Free, без фтора, туба (100 г)

3382

Паста Cleanic™ вкус зелёного яблока, с фтором, туба (100 г)




УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr. ООО «И Эйч Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr

РЕСТАВРАЦИЯ

ГИД ПО ВЫБОРУ ЦЕМЕНТА ДЛЯ ФИКСАЦИИ

Виды материалов		Стеклокерамика: • Дисиликат лития • Лейцитная керамика	Полево-шпатная керамика	Композиты	Оксид циркония	Металл, PFM сплавы	Золото
Виды конструкций							
Постоянная фиксация	 Виниры	NX3, Maxcem Elite™ Universal	NX3, Maxcem Elite™ Universal	NX3, Maxcem Elite™ Universal			
	 Коронки	Maxcem Elite™ Universal, NX3	Maxcem Elite™ Universal, NX3	Nexus™ RMGI, Maxcem Elite™ Universal, NX3	Maxcem Elite™ Universal, Nexus™ RMGI, NX3	Nexus™ RMGI, Maxcem Elite™ Universal, NX3	NX3
	 Вкладки/ накладки	NX3	NX3	NX3, Nexus™ RMGI		NX3, Nexus™ RMGI, Maxcem Elite™ Universal	NX3
	 Мостовидные конструкции	Maxcem Elite™ Universal, NX3	Maxcem Elite™ Universal, NX3		Maxcem Elite™ Universal, Nexus™ RMGI	Nexus™ RMGI, Maxcem Elite™ Universal, NX3	
	 Мост Мериленд	NX3	NX3	NX3		NX3	
	 Абатмент на имплантаты				Maxcem Elite™ Universal, NX3	Maxcem Elite™ Universal, NX3	
	 Эндодонтический штифт (анкерный, стекловолоконный)					Maxcem Elite™ Universal, Nexus™ RMGI, NX3	
Временная фиксация	 Временные реставрации			Temp-Bond Clear™, Temp-Bond NE™			
	 Постоянные реставрации			Temp-Bond Clear™, Temp-Bond NE™			

 Наиболее рекомендованный цемент для использования

 Рекомендованный цемент для использования

Kerr™

РЕСТАВРАЦИЯ

КЛИНИЧЕСКИЙ КЕЙС



Доктор Виктор Рыбальченко
Стоматолог-терапевт,
г. Пятигорск

Фронтальная группа. OptiShade™

1



Исходная ситуация
Диагноз – кариес дентина на зубах 1.1 и 2.1.
Вид с вестибулярной поверхности

2



Вид с небной поверхности

3




Чистовое препарирование. Вестибулярная поверхность

4



Чистовое препарирование. Небная поверхность.
Далее адгезивная подготовка OptiBond™ FL

5

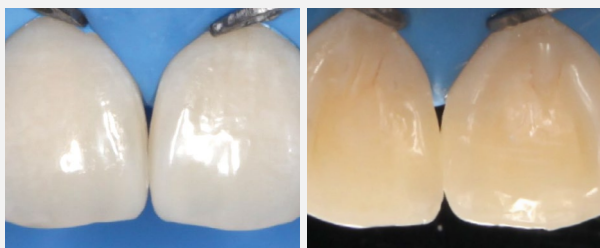


Реставрация композитным материалом OptiShade™ Medium

6




Вид небной поверхности после полировки
с помощью Identoflex™ Composite – Yellow, Opti1Step™,
Identoflex™ Composite – White

7

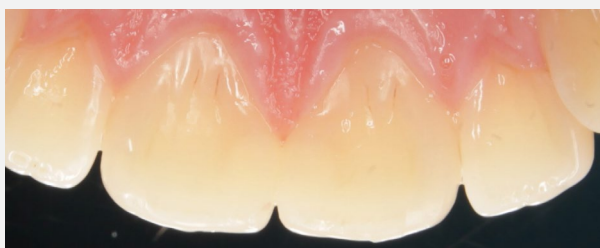

Вид реставрации через неделю – вид палатинально

8

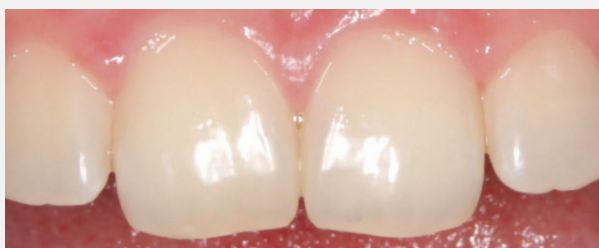

Вид реставрации через неделю – вид вестибулярно



Доктор Руслан Беретарь

Врач стоматолог-терапевт, ортопед.

Автор методических пособий и курсов по прямой реставрации.

Учредитель и главный врач клиники «RBCLINIC», г. Майкоп

Адгезивный протокол OptiBond™ FL

Я использую OptiBond™ FL уже более 12 лет на терапевтическом и ортопедическом приеме. Адгезив высоко наполнен — поэтому он обеспечивает выживание шва реставрации в долгосрочной перспективе. Кроме того, при соблюдении протокола вы не столкнетесь с проблемой «белой линии» и постпломбировочной чувствительности. Любите своих пациентов: не пересушивайте дентин перед нанесением праймера и работайте строго по инструкции.

Данный отзыв представляет мнение доктора Беретаря. Производитель стоматологической продукции Kerr не дает медицинских консультаций, каждый врач должен руководствоваться собственным профессиональным мнением при лечении пациентов.


Этап 1. Gel Etchant

1



Динамическое протравливание эмали в течение 15 сек.

2

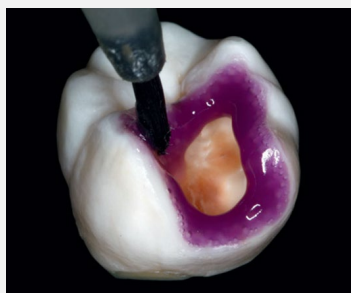

Протравливание дентина в течение 5 сек.

3



Тщательное промывание полости в течение 15–20 сек. до полного удаления геля. Удаление из полости излишков влаги. НЕ ПЕРЕСУШИВАТЬ!

ВАЖНО! Густая консистенция Gel Etchant позволяет контролируемо протравливать эмаль и дентин отдельно друг от друга, что является критичным, учитывая разную степень минерализации и, следовательно, РАЗНОЕ ВРЕМЯ ПРОТРАВЛИВАНИЯ.

OptiBond™ FL

- Сила адгезии, подтвержденная более чем 30-летним опытом применения. «Золотой стандарт» по мнению ведущих университетов мира
- Высокая наполненность (48 %) позволяет надежно запечатать дентин и обеспечить высокий уровень защиты от микроподтеканий
- Простой протокол: один слой праймера, один слой адгезива, одно засвечивание

26684 E

OptiBond™ FL, набор: 1 флакон праймера (8 мл), 1 флакон адгезива (8 мл), 1 шприц протравливающего геля Gel Etchant (3 г) с 10 насадками, 25 емкостей для смешивания, 50 аппликаторов

25882 E


Адгезив, флакон (8 мл)



Kerr
РЕСТАВРАЦИЯ


Этап 2. Праймер OptiBond™ FL

1

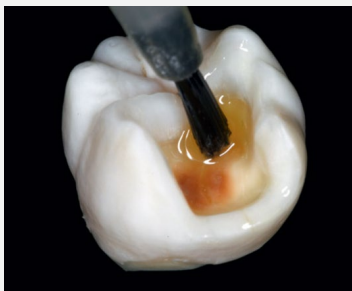

Внесение праймера на поверхность дентина легкими втирающими движениями в течение 15 сек.

2

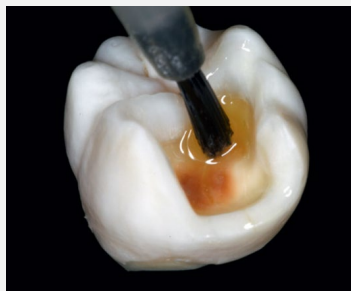

Повторное внесение праймера для гибридации всего объема деминерализованного дентина.


3




Просушивание поверхности струей воздуха для более равномерного распределения праймера и испарения растворителя.

Этап 3. Адгезив OptiBond™ FL


1

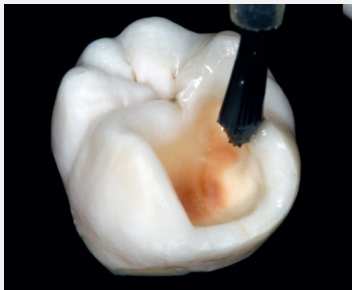

Внесение адгезива на поверхность эмали и дентина. Деликатно раздуйте его струей воздуха до тонкого равномерного слоя.

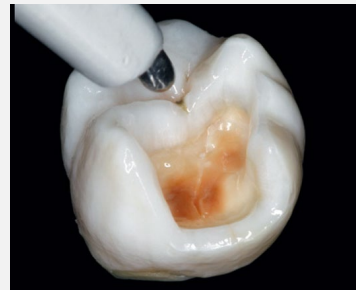

3

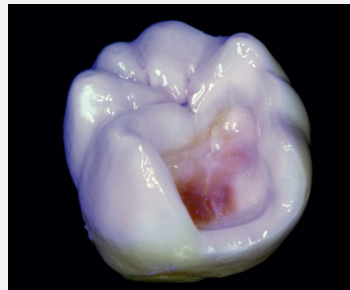

Полимеризация в течение 20 сек.

ВАЖНО! Высокая наполненность адгезива (48 %) гарантирует формирование прочного адгезивного слоя, также выполняющего функцию суперадаптивного слоя.



Доктор Ильяс Османов

Врач стоматолог-терапевт, ортопед.

Кандидат медицинских наук.

Основатель «Центра современной стоматологии "ILFA", г. Москва



Видеоинструкция

Я использую OptiBond™ FL, так как он является самым наполненным адгезивом из всех, что представлены на рынке, а наполненность — значит прочность! OptiBond™ FL прост в использовании и не даром является золотым стандартом среди всех адгезивов такое долгое время.

Данный отзыв представляет мнение доктора Османова. Производитель стоматологической продукции Kerr не дает медицинских консультаций, каждый врач должен руководствоваться собственным профессиональным мнением при лечении пациентов.



Каталог продукции

быстрый и удобный поиск информации о продуктах (документация, артикулы для заказа)



Протоколы применения

Пошаговые протоколы в формате фото и видео, клинические кейсы от ведущих стоматологов, рекомендации от производителя



Где купить

Контакты официальных дилеров и представителей **Kerr**



Задать вопрос

Консультация с представителем **Kerr** в режиме онлайн или по электронной почте





События

Календарь мероприятий и регистрация на бесплатные вебинары



Новостная рассылка

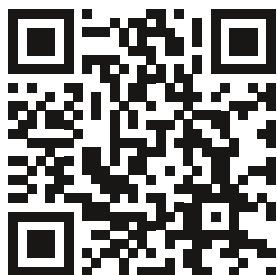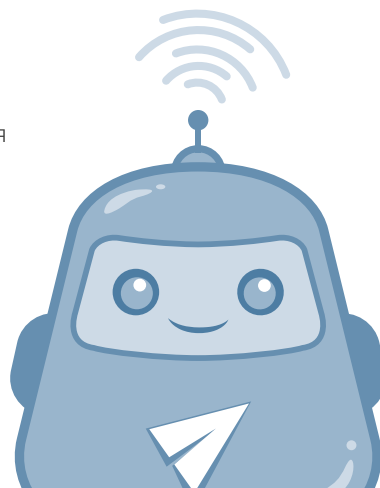

Присоединитесь к Telegram-боту Kerr™
и получите сборник с записями вебинаров